


Οδηγός εύκολης εφαρμογής στο σπίτι Αυτοέλεγχος με το Elco Test – Βήμα προς βήμα

Ο παρών οδηγός σας βοηθά να πραγματοποιήσετε **μόνοι σας** τον αυτοέλεγχο στο σπίτι, με **εύκολο, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο**.

Τι περιλαμβάνει το κουτί

Ανοίγοντας τη συσκευασία θα βρείτε:

- χαρτί συλλογής δείγματος (με ειδικά αυτοκόλλητα),
- κασέτα ανοσοχρωματογραφίας,
- φιαλίδιο συλλογής δείγματος με στικ,
- **φύλλο οδηγιών εφαρμογής του προϊόντος.**

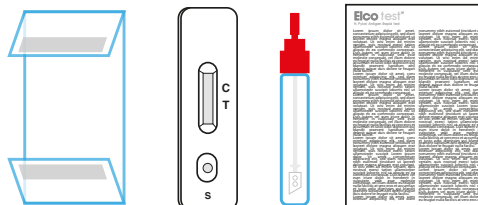

Το δείγμα μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Δεν είναι απαραίτητη η πρωινή κένωση.

ΒΗΜΑ 1

Συλλογή δείγματος κοπράνων

Τρόπος Α – Προτεινόμενος

(με το χαρτί συλλογής)

1. Τοποθετήστε το χαρτί συλλογής κάτω από το κάθισμα της τουαλέτας, χρησιμοποιώντας τα ειδικά αυτοκόλλητα (όπως φαίνεται στη φωτογραφία στο πίσω μέρος του κουτιού).
2. Κατεβάστε το καπάκι της τουαλέτας ώστε το χαρτί να παραμείνει σταθερό.
3. Πραγματοποιήστε την κένωσή σας επάνω στο χαρτί συλλογής.
4. Ξεβιδώστε το επάνω μέρος του φιαλιδίου (στικ συλλογής).
5. Ακουμπήστε απαλά το στικ **σε 4-5 διαφορετικά σημεία** της κένωσης.
 - Δεν απαιτείται ποσότητα δείγματος.
 - Αρκεί απλή επαφή με την επιφάνεια.
6. Βιδώστε ξανά καλά το φιαλίδιο.
7. Αφαιρέστε το χαρτί συλλογής και πατήστε το καζανάκι.

✓ Το χαρτί συλλογής είναι **βιοδιασπώμενο**.

Τρόπος Β – Εναλλακτικός

(με χαρτί υγιείας)

1. Τοποθετήστε αρκετό χαρτί υγιείας μέσα στη λεκάνη, ώστε η κένωση να παραμείνει ψηλά και να μην έρθει σε επαφή με το νερό.
2. Με το στικ του φιαλιδίου ακουμπήστε σε **4 διαφορετικά σημεία** της κένωσης.
3. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα δείγματος.

Αν το δείγμα είναι πιο υδαρές ή περιέχει μικρή ποσότητα ούρων, **το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται**.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση του τεστ

1. Ανακινήστε καλά το φιαλίδιο.
2. Σπάστε το επάνω ρύγχος του φιαλιδίου (όπως φαίνεται στη φωτογραφία στο πίσω μέρος του κουτιού).
3. Τοποθετήστε **3 σταγόνες** στην κασέτα ανοσοχρωματογραφίας, στη θέση S.
4. Περιμένετε **15 λεπτά**.

Ανάγνωση αποτελέσματος

- ✓ Πρέπει πρώτα να εμφανιστεί **μία κόκκινη γραμμή στη θέση C (Control)** → το τεστ εκτελέστηκε σωστά.
- ✚ Αν εμφανιστεί **δεύτερη κόκκινη ή αχνή ροζ γραμμή στη θέση T**, το αποτέλεσμα είναι **θετικό**.
- Αν **δεν εμφανιστεί γραμμή στη θέση T**, το αποτέλεσμα είναι **αρνητικό**.



Μην διαβάζετε το αποτέλεσμα μετά την πάροδο **20 λεπτών**.

Σημαντικό

Σε περίπτωση **θετικού αποτελέσματος**, συμβουλευτείτε **άμεσα τον γιατρό σας** για περαιτέρω αξιολόγηση και οδηγίες.